



# switle

## CareWater™

要時生成型亜塩素酸イオン®濃縮水溶液  
スイトル ケアウォーター



## 肌にやさしく、清らかに

敏感な肌にも配慮した処方で、介護の時間をもっと快適に



## switle BODYに入れて使う化粧水

清水タンクの水にswitle CareWaterを少量を加えるだけで、肌に潤いを与え、健やかな肌環境へ導きます。

また、機器内部の汚水経路にも作用し、衛生環境を保持します。介護現場や在宅ケアでご利用いただくほか、災害時の保清環境維持にも使用できる新しい化粧水です。

※本製品は化粧水です。疾病の治療・予防を目的としたものではありません。



### やさしく、肌に寄り添う

アルコールや香料不使用なので、低刺激。敏感肌や乾燥肌に、ご使用いただけます。肌をやさしく保護しながら、健やかな肌環境を保てます。



### 肌にも、機器にもやさしく

清水タンクに本品を10mL加えるだけ。手間なく簡単にご使用でき、日々のケアに導入しやすい仕様です。機器のメンテナンスも同時に行え、介護者の負担を軽減します。



### “もしも”の時にも安心を

被災時に衛生環境の保持が難しくなった場合でも、switle CareWaterがあれば安心です。電力復旧時にswitle BODYと組み合わせて使用すると、さらに効果的です。

## 革新的な酸化制御技術MA-T System®※1を採用!


# MA-T System<sup>®</sup> のメカニズム

MA-T<sup>®</sup>は「要事生成形亜塩素酸水イオン水溶液<sup>®</sup>」を含む、革新的な酸化制御技術を用いた水溶液です。水溶液中の水性ラジカルが必要な時に必要な分だけ活性化し、ウイルスや菌、臭いに対して効果を発揮します。※ラジカル:酸化力が非常に高い状態のこと

MA-T<sup>®</sup>の取り組みは内閣府主催の第6回日本オープンイノベーション大賞で内閣総理大臣賞を受賞しました!



MA-T<sup>®</sup>を含む水溶液を噴射した箇所に菌やウイルスがいる場合

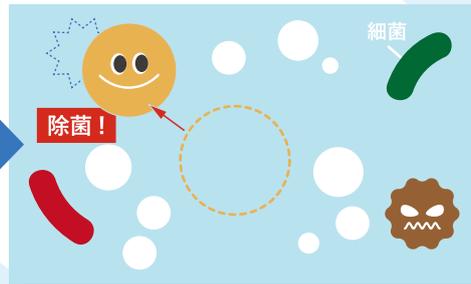

水性ラジカルが菌やウイルスにぶつかることで除菌



MA-T<sup>®</sup>の制御により、新たに水性ラジカルが1つ生成され、菌がなくなるまでMA-Tシステムが機能し続ける

この技術により、塩素系製剤と同等以上の反応性を持ちながらも、刺激・臭気・腐食性を抑えた設計が可能に。その特性から、医療・介護・食品衛生など幅広い分野で「人と環境にやさしい衛生技術」として注目されています。

※MA-T<sup>®</sup>、およびMA-T System<sup>®</sup> は一般社団法人 日本MA-T工業会の商標登録です。株式会社シリウスは日本MA-T工業会に所属しています。



## switle CareWater<sup>™</sup> のポイント



99%水

成分の99%は水のため、極めて高い安全性で安心。



アルコールフリー

アルコールフリー・無香料。デリケートなお肌にも使用可能。



高齢者にも安心

保湿成分配合。肌が弱く、乾燥しやすい高齢者におすすめの化粧水。



経済的

約100回使用でき、ランニングコストを抑えることが可能。



長期保存可能

未開封の場合は3年の長期保存が可能。開封後の使用期限は6ヶ月。



品番 SWB-CW1001 (1本入) / SWB-CW1006 (6本入)

内容量 1000mL

成分 水・リン酸2Na・亜塩素酸Na・ベンザルコニウムクロリド

標準小売価格 オープン

使用方法 水1Lに対して、10mLを添加(100倍希釈)して使用

注意事項

- ・必ず水道水で希釈する。
- ・酸性、塩素系、アルコール等の物質と混ぜない。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用する。  
※使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた時、また、ご使用後に日光にあたって同じような異常が出た時は、使用を中止し、皮膚科医等に相談。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管。
- ・極端に高温や低音の場所(車の中等)、直射日光のあたる場所には保管しない。
- ・製品ラベルに記載の「使用上の注意」をよく読み、用法、容量を守って使用する。

### ●製品についての全般的なご相談

コールセンター ☎ 0120-914-649

携帯電話からは 03-5817-4474

(受付時間) 平日10時~18時まで。土日祝日、年末年始、GW、夏季休業日はお休みとさせていただきます。

〒110-0015

東京都台東区東上野1丁目14番9号中島ビル201

<http://www.sirius-agent.co.jp>



- switle<sup>®</sup> (スイトル<sup>®</sup>) は株式会社シリウスの登録商標です。
- このカタログは2025年12月現在の内容です。
- カタログに記載の内容は改善などのため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷などの状況により実物と若干異なる場合があります。

